



matrx[®]MAC



DOSSIER MULTI-RÉGLABLE
Personnalisation sans effort





matrx[®]MAC


Conception clinique

Découvrez notre nouvelle approche pour le maintien postural : le Matrx[®] MAC est notre nouveau dossier multi-réglable, disponible avec un insert HUG en option.

AJUSTEMENTS PERSONNALISÉS

Entièrement configurable pour convenir au plus grand nombre de morphologies, et ajustable en cas d'évolution des besoins.

Le Matrx MAC est notre nouvelle solution qui apporte des ajustements, un positionnement et un confort personnalisés.

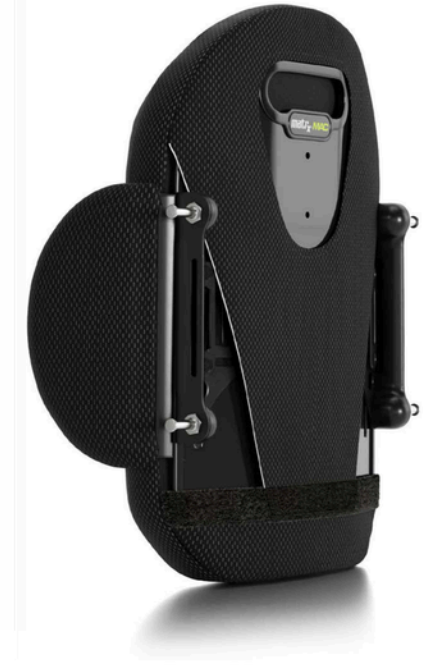

PRÉCISION

Chaque spécificité développée par notre équipe de cliniciens vise l'efficacité et un positionnement de qualité. Combinez les maintiens latéraux pour créer une solution de positionnement personnalisée.



CONFORT

La forme du dossier et l'insert optionnel HUG offrent immersion et enveloppement tout en améliorant le confort de l'utilisateur.



MAINTIEN

Conçu à partir de la forme anatomique du dossier Matrx Elite E2, le Matrx MAC promeut une posture optimale et un renforcement de l'alignement naturel.

m Modulaire pour suivre les besoins de l'utilisateur

Le Matrx MAC est une solution modulaire

adaptée aux bascules d'assise et de dossier. Il apporte des maintiens latéraux interchangeables et ambidextres qui peuvent être combinés pour offrir un maintien de tronc sur-mesure pour les personnes ayant des besoins de positionnement complexes.

PERSONNALISEZ
3 profondeurs et soutiens
asymétriques

NOUVEAU :
2 hauteurs de 20 et 25 cm




ASYMÉTRIE

Maintien latéral 23 cm



EXTRA DEEP

Maintien latéral 15 cm

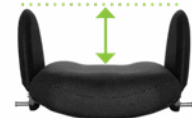

DEEP

Maintien latéral 9 cm



STANDARD

m Aide à corriger les scolioses légères

L'effondrement postural peut impacter le fonctionnement des organes. Le Matrx MAC offre un alignement naturel de la colonne vertébrale et de la posture.



LARGEUR ET
HAUTEUR
AJUSTABLES



Adapté aux fauteuils
jusqu'à 5 cm plus
larges que le dossier



Adapté aux fauteuils
de même largeur
que le dossier



Adapté aux fauteuils
jusqu'à 2,5 cm moins
larges que le dossier

Choisissez le Matrix HUG pour un confort plus poussé

La garniture de coussin optionnelle HUG est composée de fibres de Stamina® souples pour un maximum d'immersion et d'enveloppement.


- Régulation du microclimat
- Hypoallergénique
- Lavable en machine et convient aux sèche-linges
- Garde sa forme

Recommandé pour les asymétries posturales légères.

Tout le monde aime les HUG !

matrix[®] HUG

OPTIONS DE GARNITURES DE DOSSIER

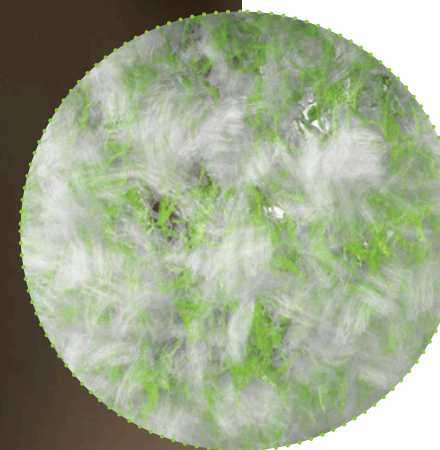

Fibre de Stamina®



STANDARD



Double épaisseur de mousse

Couches de mousse à haute résilience super moelleuse/ferme pour assurer le confort et le maintien

OPTIONNEL



HUG

Fibres de Stamina® souples pour un maximum de confort et d'enveloppement

m Regardez de plus près

Le Matrx MAC a une structure

ergonomique enveloppante conçue à partir du Matrx® Elite E2 avec des maintiens scapulaires pour des utilisations avec des bascules d'assise et de dossier.

INTERFACE D'APPUI-TÊTE

Interface d'appui-tête HD inclus

COUSSIN CENTRAL

Double épaisseur de mousse ou HUG avec de la fibre de Stamina® (non présenté)

OUTIL D'INSTALLATION

Permet une installation facile garantissant l'alignement de la plaque de dossier et des maintiens latéraux pendant l'installation



COMBINER & CRÉER

Les maintiens latéraux sont interchangeables. Ils peuvent donc être combinés et assortis en fonction des besoins spécifiques

AJUSTEMENT DE LA LARGEUR

Ambidextres et interchangeables, les maintiens latéraux sont ajustables indépendamment, permettant d'ajuster la largeur de dossier jusqu'à 3 cm

AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR

3 profils de maintiens latéraux sont disponibles avec des profondeurs différentes

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

Les maintiens latéraux peuvent être réglés en hauteur indépendamment même lorsque l'utilisateur est assis dans son fauteuil



Montage et options de fixation



MONTAGE FACILE

Fixations standards pour les dossiers avec une hauteur allant de 46 à 56 cm. Démontage rapide pour enlever facilement le dossier.



KIT HD

Recommandé pour un usage impliquant des masses importantes ou pour un usage intensif.



SPLIT

Permet le dégagement des obstacles du châssis, démontage rapide pour les cannes de dossier de 46 à 56 cm de hauteur. Le démontage rapide permet de retirer aisément le dossier du fauteuil.



FIXES

Le montage et le démontage nécessitent des outils. Ces attaches sont recommandées pour l'utilisation de bascules d'assise et de dossier. Adaptées pour des dossiers avec des hauteurs comprises entre 46 et 56 cm.

Tailles de dossier

NOUVELLES TAILLES

	LARGEUR						
	36 cm	38 cm	41 cm	43 cm	46 cm	48 cm	51cm
FITS W/C	33 - 41 cm	36 - 43 cm	38 - 46 cm	41 - 48 cm	43 - 51 cm	46 - 53 cm	49 - 56 cm
HAUTEUR	36 cm	*	*				
	41 cm	*	*	*	*	*	*
	46 cm	*	*	*	*	*	*
	51 cm	*	*	*	*	*	*
	56 cm	*	*	*	*	*	*
*61 cm			*	*	*	*	*

Caractéristiques techniques

-  Ajustable en angle40°
-  Ajustable en profondeur sur10cm
-  Profondeurs de galbe de9, 15, 23cm
-  Réglage latéral sur2.6cm
-  Réglage en hauteur des supports latéraux sur20cm
-  Lavage de la housse à60°C
-  Poids max. utilisateur136kg
-  Garantie2 ans



● Matrx MAC combiné avec un appui-tête Matrx Loxx sur un fauteuil roulant Rea Azalea



Les dossiers Matrix® MAC utilisés pour le transport de personnes doivent être équipés d'un appui-tête et doivent être utilisés uniquement avec des fauteuils roulants conformes aux exigences des normes RESNA WC19 ou ISO 7176-19



invacare.fr

©2026 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit. FR - 05/26.